

# Weiche Kontaktlinsen • Pflegeanleitung • Peroxid-Lösung



## 1. Händewaschen

Jedes Mal bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, waschen Sie sich gründlich die Hände mit Seife und trocknen sie ab.

Anschließend Linsen einzeln vom Auge abnehmen.



## 2. Kontaktlinsen einlegen


Öffnen Sie den Behälter und legen Sie die rechte und linke Kontaktlinse in die jeweilige Halterung des Körbchens: R = rechts, L = links.

Linsen nicht einklemmen!



## 3. Behälter füllen

Füllen Sie den Behälter bis zur Markierung mit frischer Peroxid-Lösung und verschließen Sie ihn.

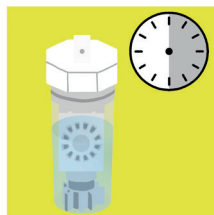

## 4. Desinfektion

Belassen Sie die Kontaktlinsen für mindestens 6 Stunden, oder über Nacht in der Lösung.


Stellen Sie sicher, dass der Behälter aufrecht steht.



## 5. Nach der Neutralisation

Nach sechs Stunden ist die Lösung neutralisiert.

TIPP: Linsen vor dem Aufsetzen nochmals mit Saline abspülen! Den Behälter inklusive Kat mit heißem Wasser spülen, ausschütteln und mit offenem Deckel bis zum Abend stehen lassen.

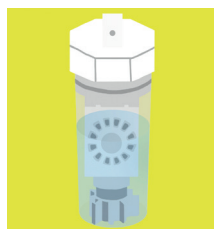

## 6. Aufbewahrung

Sie können Ihre Kontaktlinsen im geschlossenen Behälter bis zu 7 Tage lang aufbewahren.

Danach müssen die Linsen erneut abgespült und desinfiziert werden, bevor sie getragen werden können.

**Verwenden Sie nur den Original-Behälter mit Katalysator-Scheibe, der jeder neuen Flasche beiliegt.**

**Der Behälter ist ein kleines Wunderwerk der Technik:**

Sobald die Katalysator Scheibe in die Lösung eingetaucht neutralisiert sie das Peroxid durch Spaltung in Wasser und Sauerstoff. Der dabei entstehende Druck entweicht durch die kleine Öffnung im Deckel.